

## Test di gravidanza

Rilevazione Rapida

- Accuratezza superiore al 99% dal giorno in cui sono previste le mestruazioni.
- **Leggi attentamente questo foglietto illustrativo prima dell'esecuzione del test.**

### 1 Prima di iniziare

Quando esegui il test, può essere utile avere un orologio a portata di mano.

Puoi eseguire il test a qualsiasi ora del giorno, a partire dal giorno in cui sono previste le mestruazioni.

### 2 Esegui il test

Quando sei pronta per eseguire il test, rimuovi l'involucro di alluminio e stacca il cappuccio. Utilizza subito lo stick di test.

Puoi eseguire il test direttamente nel flusso di urina, oppure in un campione di urina raccolto in un contenitore asciutto e pulito.

- Tieni la punta che cambia colore rivolta verso il basso nel flusso di urina, oppure nel campione di urina raccolto, come mostrato, contando **5 secondi interi**.
- La punta che cambia colore diventa immediatamente rosa per mostrare che l'urina viene assorbita. **Devi continuare a tenere la punta che cambia colore nell'urina per 5 secondi interi.**



- Tieni la punta che cambia colore rivolta verso il basso o appoggia lo stick di test in piano finché non sei pronta per leggere il risultato e non è apparsa una linea blu nella finestra di controllo.



Devi continuare a tenere la punta che cambia colore nell'urina per 5 secondi interi.

Inizia a contare i 5 secondi non appena vedi diventare rosa la punta che cambia colore.

Flusso di urina **OPPURE** Campione raccolto

- Se lo desideri, puoi rimettere il cappuccio.
- Se la punta che cambia colore non diventa completamente rosa, vedi Domanda 5.



**ATTENDI 3 MINUTI.** Man mano che il test procede, vedrai che inizieranno a svilupparsi delle linee blu.

### 3 Leggi il risultato


Puoi leggere il risultato nella finestra del risultato.

**Quando leggi il risultato, nella finestra di controllo deve essere presente una linea blu. Questa linea mostra che il test ha funzionato.**

Il risultato 'Incinta' può apparire anche nel giro di 1 minuto se esegui il test dal giorno di ritardo del ciclo (cioè il giorno successivo al giorno previsto delle mestruazioni).

Per confermare un risultato 'Non Incinta', devi attendere per 3 minuti interi (vedi Domanda 8).

Se non c'è alcuna una linea blu nella finestra di controllo, il test non ha funzionato (vedi Domanda 6).

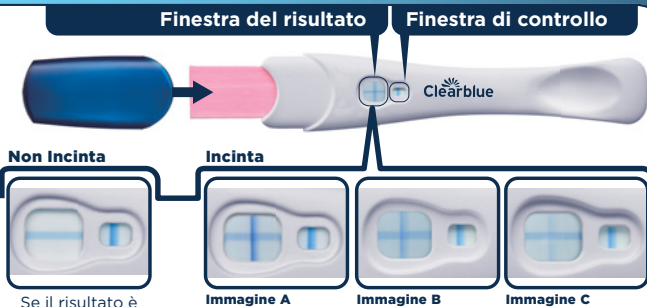

Se il risultato è 'Non Incinta' vedi Domanda 10.

Immagine A

Immagine B

Immagine C

- Se il risultato è 'Incinta', vedi Domanda 11.
- Se hai ancora qualche dubbio sul risultato, vedi Domanda 7.

**Non importa se una delle linee che formano il simbolo '+' è più chiara o più scura dell'altra; il risultato è 'Incinta'.**

**IMPORTANTE!** Leggi il risultato entro **10 minuti** dall'esecuzione del test. Ignora tutti i cambiamenti del risultato che si sono verificati successivamente.

## Domande e risposte

**1 Qual è l'accuratezza di Clearblue?**  
Clearblue ha un'accuratezza superiore al 99% nei test di laboratorio, quando viene usato dal giorno previsto delle mestruazioni.

**2 Come funziona Clearblue?**  
Quando sei incinta, il tuo corpo produce l'ormone della gravidanza hCG (Gonadotropina Corionica umana). La quantità di hCG nel tuo corpo aumenta nelle fasi iniziali della gravidanza. Clearblue Rilevazione Rapida può rilevare quantità minime di questo ormone presenti nell'urina (la sensibilità di questo test è di 25 mIU/ml).

**3 Non sono sicura del giorno in cui sono previste le prossime mestruazioni. Come posso sapere che sto eseguendo il test nel momento giusto?**

Per calcolare quando sono previste le mestruazioni, calcola la lunghezza normale del tuo ciclo mestruale contando il numero di giorni dal primo giorno del ciclo fino al giorno prima dell'inizio del ciclo successivo.

• Se i tuoi cicli sono irregolari, prima di eseguire il test dovresti lasciar trascorrere un tempo pari al ciclo mestruale più lungo degli ultimi mesi.

Se è il risultato è 'Non Incinta', ma sospetti comunque una gravidanza, vedi Domanda 10.

**4 Vi sono farmaci o condizioni mediche che possono influire sul risultato?**

• **Prima** di eseguire un test, leggi sempre le istruzioni del produttore di qualsiasi farmaco che stai assumendo.

• I farmaci per la fertilità contenenti hCG possono produrre risultati ingannevoli (i farmaci per la fertilità vengono solitamente somministrati per iniezione e un test troppo vicino alla somministrazione può produrre un falso risultato 'Incinta').

• Altre terapie per l'infertilità (come il citrato di clomifene), antidolorifici e contraccettivi ormonali (come la pillola anticoncezionale) non dovrebbero influire sul risultato.

• Se hai smesso recentemente di usare la contraccezione ormonale o hai in corso terapie per l'infertilità, ad esempio con citrato di clomifene, i tuoi cicli potrebbero essere irregolari e indurre a un'esecuzione anticipata del test.

• Se di recente sei stata incinta (anche se non hai portato a termine la gravidanza) potresti ottenere un falso risultato 'Incinta'.

• La gravidanza ectopica, le cisti ovariche, la menopausa e alcune condizioni mediche estremamente rare potrebbero produrre risultati ingannevoli.

• Se ottieni il risultato 'Incinta', è possibile che in seguito riscontri di non essere incinta a causa di un'interruzione naturale della gravidanza che si è verificata durante le prime fasi.

Se ottieni risultati imprevisti, dovresti parlarne con il tuo medico.

**5 Ho utilizzato il test di gravidanza ma la punta che cambia colore non è diventata completamente rosa. Che cosa devo fare?**

Se la punta che cambia colore non è diventata completamente rosa, l'urina utilizzata potrebbe essere stata insufficiente.

Tuttavia, se nella finestra di controllo appare la linea blu entro 10 minuti dall'esecuzione del test, il test ha funzionato. Se entro 10 minuti dall'inizio del test non appare alcuna linea blu nella finestra di controllo, vedi Domanda 6.

**6 Ho utilizzato il test di gravidanza ma non è apparsa alcuna linea blu nella finestra di controllo. Che cosa devo fare?**

Se non è presente alcuna linea blu nella finestra di controllo entro 10 minuti dall'esecuzione del test, il test non ha funzionato.

La causa potrebbe essere una delle seguenti:

• La punta che cambia colore non è stata rivolta verso il basso, oppure lo stick (di test) non era stato appoggiato in piano dopo l'applicazione dell'urina.

• È stata utilizzata troppa o troppo poca urina. **Il campionario deve durare 5 secondi.**

Devi rieseguire il test, usando un nuovo stick di test e seguendo le istruzioni con attenzione. Puoi anche raccogliere un campione di urina in un contenitore asciutto e pulito e immergervi per 5 secondi la punta che cambia colore.

**7 Che cosa devo fare se ho dei dubbi sul risultato?**

• Perché il tuo risultato sia 'Incinta', entro 10 minuti dall'esecuzione del test devono esserci una linea blu nella finestra di controllo e un simbolo '+' nella finestra del risultato.

L'aspetto del simbolo '+' nella finestra del risultato può variare, ma le linee che compongono il simbolo '+' e la linea nella finestra di controllo devono avere larghezze simili (vedere le immagini A-C).

**Immagine A**

Questo risultato è più probabile se sei incinta ed esegui il test dopo svariati giorni di ritardo delle mestruazioni, in quanto i livelli di hCG sono più alti.

**Immagine B**

Questo risultato non è insolito se sei incinta ed esegui il test nel primo giorno di ritardo delle mestruazioni o nei giorni vicini a esso, in quanto i livelli di hCG sono ancora relativamente bassi.

**Immagine C**

Anche se sbiadito, indica comunque il risultato 'Incinta'. Se hai ancora qualche dubbio sul risultato, dovresti aspettare almeno 3 giorni prima di eseguire nuovamente il test, seguendo con cura le istruzioni.

• Perché il tuo risultato sia 'Non Incinta', entro 10 minuti dall'esecuzione del test devono esserci una linea blu nella finestra di controllo e un simbolo '-' (meno) nella finestra del risultato.

Se è il risultato è 'Non Incinta' ma sospetti comunque una gravidanza, vedi Domanda 10.

**8 Quando posso leggere il risultato?**

Il risultato 'Incinta' potrebbe apparire entro 1 minuto se il test viene eseguito dal giorno in cui si riscontra un ritardo delle mestruazioni (cioè il giorno successivo al giorno previsto delle mestruazioni).

Prima di leggere il risultato, assicurati che nella finestra di controllo sia presente anche una linea blu. Devi **attendere 3 minuti** per confermare il risultato 'Non Incinta'. Se nella finestra di controllo non appare alcuna linea blu entro **10 minuti**, il test non ha funzionato (vedi Domanda 6).

**9 Quanto rimane visibile il risultato?**

Il risultato può essere letto in qualsiasi momento, da 3 a 10 minuti. Dopo 10 minuti, qualsiasi cambiamento nel risultato deve essere ignorato.

**10 Il test dice 'Non Incinta'. Che cosa devo fare?**

Potresti non essere incinta, oppure il livello di ormone della gravidanza potrebbe non essere ancora abbastanza alto da poter essere rilevato, o potresti aver calcolato male il giorno previsto per le mestruazioni.

• Se hai eseguito il test troppo presto, esegui nuovamente il test nel giorno in cui erano previste le mestruazioni.

• Se il giorno in cui erano previste le mestruazioni è già trascorso, ripeti il test dopo 3 giorni. Se questo test produce ancora un risultato 'Non Incinta' e le mestruazioni non sono ancora arrivate, consulta il tuo medico.

**11 Il test dice 'Incinta'. Che cosa devo fare?**

Se il test dice che sei incinta, dovresti consultare il tuo medico per informazioni su ciò che devi fare.

## www.clearblue.com

Gli operatori sono disponibili dal Lun-Ven ore 08:00-16:00, festivi esclusi.

**0800 102 865**

Gratuito da rete fissa, da rete mobile possibili addebiti. Tutte le chiamate vengono registrate e potrebbero essere monitorate al fine di Controllo della Qualità. Vi preghiamo di essere pronti a citare il numero di lotto.

Per test eseguiti a casa in modo autonomo.

Solo per uso diagnostico *in vitro*.

Non per uso interno.

Non riutilizzare.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Conservare a 2 °C - 30 °C.

Se conservato in frigorifero, lasciare a temperatura ambiente per 30 minuti prima di eseguire il test.

Non utilizzare se l'involucro di alluminio è danneggiato.

Non usare dopo la data di scadenza.

Smaltire insieme ai normali rifiuti domestici.



0123

Per le fasi successive, informazioni e consigli generali sulle problematiche della gravidanza, visita il nostro sito web all'indirizzo: [www.clearblue.com](http://www.clearblue.com)

	Produttore		Non riutilizzare
	Codice lotto		Dispositivo medico diagnostico per esami <i>in vitro</i>
	Data di scadenza		Limiti di temperatura 2 °C - 30 °C



SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),  
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ginevra, Svizzera.  
Clearblue è un marchio di fabbrica di SPD.  
© 2019 SPD. Tutti i diritti riservati.

2300499.02 03-2019