

Test di gravidanza con Indicatore delle Settimane

- Se esegui il test a partire dal giorno previsto del ciclo mestruale, puoi eseguire il test a qualsiasi ora del giorno per sapere se sei incinta.
- Se esegui il test prima del giorno in cui sono previste le mestruazioni, usa la prima urina del giorno.
- Per un risultato accurato dell'Indicatore delle Settimane, devi usare la prima urina del giorno.
- Non bere grandi quantità di liquidi prima di eseguire il test.
- **Leggi attentamente questo foglietto illustrativo prima dell'esecuzione del test.**

1 Esegui il test

Quando sei pronta a eseguire il test, estrai lo stick di test dall'involucro di alluminio e rimuovi il cappuccio blu. Utilizza subito lo stick di test.

PUOI

Eseguire il test nel flusso di urina

OPPURE

Raccogliere un campione di urina in un contenitore asciutto e pulito

- Tieni nel flusso di urina l'estremità assorbente rivolta verso il basso **per soli 5 secondi**.
- Fai attenzione a non bagnare il resto dello stick di test.
- Se lo desideri, puoi rimettere il cappuccio sullo stick di test e appoggiarlo in piano.




- Colloca l'estremità assorbente nell'urina, rivolta verso il basso come mostrato, **per soli 20 secondi**.
- Se lo desideri, puoi rimettere il cappuccio sullo stick di test e appoggiarlo in piano.



2 Attendi...

- Il simbolo di attesa lampeggia per mostrare che il test è in corso.
- Quando il simbolo di attesa smette di lampeggiare, appare il risultato. Se il simbolo di attesa non appare dopo che hai usato il test, vedi domanda 6.

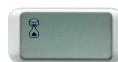

Durante il test, non tenere **maf** lo stick di test con l'estremità assorbente rivolta verso l'alto.

3 Leggi il risultato

L'**Indicatore delle Settimane** fornisce una stima del giorno in cui è avvenuto il concepimento. Questa informazione viene visualizzata sul display insieme al risultato 'Incinta'.

- Il display mostra il risultato entro **3 minuti**.
- Il risultato 'Incinta' potrebbe apparire sul display **prima** del risultato dell'Indicatore delle Settimane. **Continua ad attendere** finché il simbolo di attesa non smette di lampeggiare, quindi leggi il risultato dell'Indicatore delle Settimane. Questo potrebbe impiegare fino a 3 minuti.
- Alcuni risultati potrebbero apparire in un solo minuto.
- Il risultato rimarrà sul display per circa 24 ore.
- Se il risultato è 'Incinta', dovresti consultare il tuo medico per informazioni su ciò che devi fare in seguito. Il medico calcolerà la fase della gravidanza in base al primo giorno dell'ultimo ciclo mestruale.
- Il concepimento avviene circa 2 settimane prima del giorno in cui è previsto il tuo successivo ciclo mestruale. L'Indicatore delle Settimane fornisce una stima di quando è avvenuto il concepimento.
- La stima del giorno del concepimento fornita dall'Indicatore delle Settimane è accurata al 93%.

La stima è basata sul livello dell'ormone della gravidanza, hCG (Gonadotropina Corionica umana), nell'urina. Il livello di hCG varia da donna a donna ed è quindi possibile che l'Indicatore delle Settimane possa a volte fornire risultati fuorvianti. L'accuratezza del risultato 'Incinta'/'Non Incinta' è superiore al 99% quando il test viene eseguito dal giorno previsto per le mestruazioni.

Errori nel test

Leggi la sezione 'Errori nel test' se hai utilizzato lo stick di test e il display non visualizza nessuno dei risultati mostrati in questa pagina.

Interpretazione dei risultati

Risultati	Tempo trascorso dal concepimento	Come il medico calcolerà la data di inizio della gravidanza (in base a un ciclo di 28 giorni*)
	Se il tuo risultato è 'Non Incinta' , vedi domanda 13.	-
	Il risultato è Incinta e il concepimento è avvenuto circa 1-2 settimane fa.	3-4 settimane
	Il risultato è Incinta e il concepimento è avvenuto circa 2-3 settimane fa.	4-5 settimane
	Il risultato è Incinta e il concepimento è avvenuto più di 3 settimane fa.	5+ settimane

*Il medico può determinare l'inizio della gravidanza dal primo giorno dell'ultimo ciclo, non dal momento del concepimento.

Domande e risposte

1 Come funziona Clearblue con Indicatore delle Settimane?

Quando sei incinta, il tuo corpo produce l'ormone della gravidanza hCG (Gonadotropina Corionica umana). La quantità di hCG nel tuo corpo aumenta nelle fasi iniziali della gravidanza. Questo test può rilevare quantità minime di questo ormone presenti nell'urina (la sensibilità di questo test è di 25 mU/ml). Basandosi sul livello di hCG nell'urina, l'Indicatore delle Settimane fornisce una stima del giorno in cui è avvenuto il concepimento.

2 Qual è il grado di accuratezza di Clearblue con Indicatore delle Settimane nella rilevazione della gravidanza?

Nei test di laboratorio, il test di gravidanza Clearblue con Indicatore delle Settimane ha rivelato una precisione superiore al 99% nel rilevare la presenza o l'assenza di una gravidanza, quando viene usato nel giorno previsto per il ciclo. Se esegui il test prima del giorno in cui è previsto il ciclo e ottieni un risultato "Non Incinta", c'è ancora una possibilità che tu sia incinta. Vedi domanda 4.

3 Qual è l'accuratezza dell'Indicatore delle Settimane?

La stima del giorno del concepimento fornita dall'Indicatore delle Settimane è accurata al 93%. La stima è basata sul livello di hCG nell'urina. Il livello di hCG varia da donna a donna e il grado di precisione che l'Indicatore delle Settimane possa a volte fornire risultati fuorvianti. L'Indicatore delle Settimane si è dimostrato coerente al 97% con l'ultima determinazione della data ottenuta mediante ecografia (11-13 settimane). Il risultato si basa su studi condotti con tra i risultati di 187 donne (a 1-2, 2-3, e più di 3 settimane dal concepimento) e la datazione mediante ecografia. Se il test viene eseguito più di 6 settimane dopo il concepimento, l'Indicatore delle Settimane potrebbe fornire risultati imprevisti. Questo accade in quanto il livello di hCG nell'urina è troppo alto perché il test possa fornire una valutazione precisa del tempo trascorso dal concepimento.

4 Quando posso utilizzare Clearblue con Indicatore delle Settimane?

Puoi eseguire il test fino a 5 giorni prima dell'eventuale ritardo delle mestruazioni, cioè 4 giorni prima del giorno previsto per l'arrivo del ciclo. Se esegui il test prima del momento in cui è previsto il ciclo e ottieni un risultato "Non Incinta", c'è ancora una possibilità che tu sia incinta. Fai riferimento alla tabella che segue per i risultati dei test clinici con campioni raccolti nelle prime fasi della gravidanza.

Test precoce				
Numero di giorni prima del giorno previsto delle mestruazioni	-1	-2	-3	-4
% di campioni da donne incinte che hanno fornito il risultato "Incinta"	98%	97%	90%	65%

Se il risultato è "Non Incinta" ma sospetti comunque una gravidanza, vedi domanda 13.

Per calcolare quando sono previste le mestruazioni, calcola la lunghezza normale del tuo ciclo mestruale contando il numero di giorni dal primo giorno del ciclo fino al giorno prima dell'inizio del ciclo successivo.

Se i tuoi cicli sono irregolari, prima di eseguire il test dovresti lasciar trascorrere un tempo pari al ciclo mestruale più lungo degli ultimi mesi.

5 Vi sono farmaci o condizioni di salute che possono influenzare i risultati?

- Prima di eseguire un test, leggi sempre le istruzioni dei produttori di qualsiasi farmaco che stai assumendo.
- I farmaci per la fertilità contenenti hCG possono produrre risultati ingannevoli (i farmaci per la fertilità vengono solitamente somministrati per iniezione un test troppo vicino alla somministrazione può produrre un falso risultato "Incinta").
- Altre terapie per l'infertilità (come il citrato di clomifene), antidiuretici e contraccettivi ormonali (come la pillola anticoncezionale) non dovrebbero influire sul risultato.
- Se hai smesso recentemente di usare la contraccettione ormonale o hai in corso terapie per l'infertilità, ad esempio con citrato di clomifene, i tuoi cicli potrebbero essere irregolari e indurre a un'esecuzione anticipata del test.
- In caso di gravidanza recente (anche se non hai portato a termine la gravidanza) potresti ottenere un falso risultato "Incinta".
- Se sei prossima alla menopausa, potresti ottenere un falso risultato "Incinta" anche se non lo sei.
- Una gravidanza ectopica e la presenza di cisti ovariche possono fornire risultati ingannevoli.
- Gravidanze multiple ed ectopiche possono dar luogo a risultati fuorvianti dell'Indicatore delle Settimane.

Se ottieni risultati imprevisti, dovresti parlarne con il tuo medico.

6 Ho utilizzato il test di gravidanza ma il simbolo di attesa non è apparso. Che cosa significa?

Il test non ha funzionato correttamente. Leggi "Errori nel test" qui sotto.

7 Ho utilizzato il test ma sul display non è apparso alcun risultato. Che cosa significa?

Il risultato deve apparire sul display entro 3 minuti. Se non è apparso alcun risultato, leggi "Errori nel test" qui sotto.

8 Il test dice "Incinta". Che cosa devo fare?

Se il risultato è "Incinta", dovresti consultare il tuo medico per informazioni su ciò che devi fare in seguito. L'Indicatore delle Settimane è solo una stima del giorno in cui si è verificato il concepimento. Il tuo medico calcolerà lo stato della gravidanza in base al primo giorno dell'ultimo ciclo. Il concepimento avviene circa 2 settimane prima del giorno previsto per il ciclo successivo.

9 Il test dice che sono incinta ma non penso che il concepimento sia avvenuto nel momento stimato dall'Indicatore delle Settimane. È possibile?

L'Indicatore delle Settimane è preciso al 93% quando il test viene eseguito con la prima urina del giorno. Alcuni farmaci o condizioni di salute possono influire sul risultato. Vedi domanda 5.

10 Ho eseguito il test ieri e il risultato era "Incinta". Ho ripetuto il test oggi e, secondo l'Indicatore delle Settimane, il numero di settimane dal concepimento è risultato inferiore. Che cosa devo fare?

L'aumento del livello di hCG è fluttuante ed è quindi possibile che l'Indicatore delle Settimane fornisca un risultato imprevisto se il test viene eseguito in giorni consecutivi. Esegui di nuovo il test dopo 5 giorni e, se il risultato dell'Indicatore delle Settimane mostra ancora una riduzione nel numero di settimane dal concepimento, vedi domanda 12.

11 Il test ha precedentemente segnalato "Incinta", ma ripetendo il test ho ottenuto il risultato "Non Incinta", oppure è iniziato il ciclo. Che cosa significa?

Anche se il test ha un'accuratezza superiore al 99% nel rilevare l'ormone della gravidanza dal giorno previsto per il ciclo, è possibile che restituisca un risultato "incinta" per poi scoprire che non lo sei (ed esempio, potresti ottenere un risultato "Non Incinta" o potresti iniziare le mestruazioni). Questo potrebbe essere dovuto a un'interruzione naturale nelle prime fasi della gravidanza, nota come "interruzione precoce della gravidanza", purtroppo non infrequente, in quanto 1 gravidanza su 4 va incontro a un'interruzione precoce. In caso di risultati imprevisti, chiedi consiglio al tuo medico.

12 Ho eseguito il test una settimana fa e il risultato era "Incinta". Ho ripetuto il test e, secondo l'Indicatore delle Settimane, il numero di settimane dal concepimento è risultato inferiore. Che cosa devo fare?

Se hai eseguito il test secondo le istruzioni, usando la prima urina del giorno in entrambe le occasioni, l'Indicatore delle Settimane ha fornito un risultato imprevisto, devi consultare il tuo medico.

13 Il test dice "Non Incinta". Che cosa devo fare?

Potresti non essere incinta, oppure il livello di ormone della gravidanza potrebbe non essere abbastanza alto da poter essere rilevato o potresti aver calcolato male il giorno previsto per le mestruazioni. Se hai eseguito il test troppo presto, esegui nuovamente il test nel giorno previsto per il ciclo. Se il giorno in cui era prevista la mestruazione è già trascorso, ripeti il test dopo 3 giorni. Se questo test produce ancora un risultato "Non Incinta" e le mestruazioni non sono ancora arrivate, consulta il tuo medico.

Errori nel test

Errore libro - si è verificato un errore durante il test. La causa potrebbe essere una delle seguenti:

- L'estremità assorbente non è stata rivolta verso il basso, oppure il test non è stato appoggiato in piano dopo l'applicazione dell'urina.
 - È stata utilizzata troppa o troppo poca urina.
- Devi rieseguire il test, usando un nuovo stick di test e seguendo le istruzioni con attenzione.

Errore con display vuoto

Il test non ha funzionato come previsto. Questo può essere dovuto al fatto che non sono state seguite le istruzioni per il uso. Devi eseguire un altro test. Segui con attenzione le istruzioni per l'uso.

Smaltimento del test

Rimuovi la batteria prima di smaltire lo stick di test. Lo smaltimento della batteria deve avvenire in conformità con le indicazioni di riciclo appropriate. Per rimuoverla, inserisci una moneta nella fessura sull'estremità e ruotala per aprire il retro dello stick di test. Se la batteria non è visibile, fai scivolare il supporto della batteria nella direzione della freccia per facilitare la rimozione. **Attenzione:** Non smontare né ricaricare le batterie e non gettarle nel fuoco. Smaltisci il resto dello stick di test secondo le indicazioni del riciclo delle apparecchiature elettriche. Non gettare le apparecchiature elettriche nel fuoco.

www.clearblue.com
 Gli operatori sono disponibili dal Lun al Ven ore 08:00 -16:00, festivi esclusi.
0800 102 865 Le chiamate sono gratuite.
 Le chiamate vengono registrate e potrebbero essere monitorate per fini di controllo qualità. È necessario avere a disposizione la confezione, incluso l'involucro interno del prodotto, quando ci contattate.

Questo monitor digitale IVD soddisfa i requisiti di emissioni e immunità dello standard EN 61326-2-6:2006. Le contromisure EMC adottate in questo strumento elettronico forniscono una ragionevole protezione contro gli effetti delle interferenze elettromagnetiche che probabilmente si possono riscontrare in ambiente domestico. Le seguenti avvertenze preventive si applicano alle apparecchiature conformi a EN 61326-2-6:2006. A) L'utilizzo di questo strumento in un ambiente secco, in particolare se sono presenti materiali sintetici (abiti sintetici, moquette, ecc.) può causare scariche elettrostatiche dannose con conseguenti errori nei risultati. B) Questo strumento non deve essere utilizzato nelle immediate vicinanze di sorgenti di forti radiazioni elettromagnetiche (es. telefoni cellulari), in quanto possono impedire il corretto funzionamento.

	Produttore		Non riutilizzare
	Codice lotto		Dispositivo medico diagnostico per esami <i>in vitro</i>
	Data di scadenza		Limiti di temperatura 2 °C - 30 °C

- Per test eseguiti a casa in modo autonomo. Solo per uso diagnostico *in vitro*.
- Non per uso interno.
- Non riutilizzare.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Conservare a 2 °C - 30 °C.
- Se conservato in frigorifero, lasciare a temperatura ambiente per 30 minuti prima di eseguire il test.
- Non utilizzare se l'involucro di alluminio è danneggiato.
- Non usare dopo la data di scadenza.
- Il prodotto contiene le batterie.
- Smaltire secondo la normativa locale in vigore.
- Contiene parti di piccole dimensioni. Non ingerire alcun componente di questo dispositivo. In caso di ingestione accidentale, richiedere assistenza medica.
- Riferisci a Clearblue eventuali lesioni causate dall'utilizzo di questo prodotto.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1215 Petit-Lancy, Ginevra, Svizzera. Clearblue è un marchio di fabbrica di SPD. © 2021 SPD. Tutti i diritti riservati.